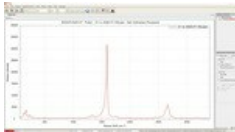

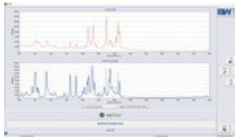


Accesorios de BWT-84000945



A continuación, los accesorios se dividen en las gamas de suministro básico y accesorios opcionales. Al efectuar sus pedidos de material de repuesto, tenga a mano esta copia impresa. Reservado el derecho a efectuar modificaciones de las recopilaciones.

Suministro básico BWT-84000945

Uds.	N.º de ped.	Descripción	
1 pzs	BWT-81000044	Software BWSpec	 <p>BWSpec® es el software de espectroscopía general de B&W Tek para el control de aparatos y el registro de datos, que incluye el análisis de picos y el registro de la historia en tiempo real. BWSpec es el software operativo que se incluye en el suministro básico con la compra de todos los sistemas y espectrómetros portátiles Raman de B&W Tek. Incluye funciones para una amplia gama de aplicaciones y realiza medidas y cálculos complejos con solo pulsar un botón. Es compatible con múltiples formatos de datos y ofrece la posibilidad de optimizar los parámetros de medida como el tiempo de integración y el control de la potencia de salida del láser. Además del registro y procesamiento de datos, también ofrece erosión oscura automática, alisamiento de espectro, corrección de línea base, monitorización de picos y registro de historial.</p>
1 pzs	BWT-810000721	Maleta de transporte para la serie i-Raman	 <p>Maleta de almacenamiento/transporte para los sistemas de la serie i-Raman. Incluye maleta negra acolchada con ruedas e incrustación de espuma a juego para un embalaje y transporte seguros de los sistemas portátiles de la serie i-Raman.</p>
1 pzs	BWT-840000102	Gafas de seguridad para láser (1064 nm)	 <p>Gafas de seguridad para láser con excitación a 1064 nm (para sistemas láser de la clase IIIB de B&W Tek).</p>
1 pzs	BWT-840000127	Software de identificación Raman BWID Pharma	 <p>Software de registro de datos e identificación de materiales para los espectrómetros Raman portátiles de B&W Tek que permite la rápida identificación y verificación de materiales basados en librerías generadas por el usuario, librerías propias de B&W Tek y librerías de terceros. Cumple con todos los requisitos de la norma 21 CFR parte 11 de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA), incluidas la seguridad de acceso al sistema, la Audit Trail de la actividad de datos y la revisión del rendimiento del sistema. Incluye una licencia de usuario. Las actualizaciones gratuitas están incluidas durante un año a partir de la fecha de compra.</p>

1 pzs	BWT-84000296	Lápiz/bolígrafo	
		Combinación de lápiz/bolígrafo para pantalla táctil.	
1 pzs	BWT-84000935	Referencia de poliestireno para STRam	
		Referencia de poliestireno para la sonda STRam.	
1 pzs	BWT-840001006	STProbe para STRam-1064	
		Calidad de laboratorio, muestreo de gran alcance, sonda Raman transparente de fibra óptica con disparador manual. Fibras de 105 µm de diámetro y 0,22 NA para excitación a 1064 nm; fibras de 300 µm de diámetro y 0,22 NA para registro Raman, densidad óptica > 6; hasta 100 cm ⁻¹ ; fibras de 1,5 m de longitud con acoplamiento FC/PC para excitación y adquisición. Ventana de vidrio de cuarzo sellada con adhesivo. Compatible con los sistemas STRam-1064 e i-Raman EXII. No es apto para su uso en líquidos.	
1 pzs	BWT-840001120	Accesorio de blindaje de luz para STRam	
		Accesorio de blindaje de luz para STRam	
1 pzs	BWT-840001121	Adaptador de enfoque	
		Adaptador de enfoque STRam de 1064 nm	
1 pzs	BWT-840001122	Controlador de superficie para sonda ST	
		Controlador de superficie para sonda ST	

Accesorios opcionales

N.º de ped.	Descripción	
BWT-81000682	Batería externa para aparatos Raman portátiles	
	<p>Batería externa de iones de litio recargable que proporciona 12 VCC inalterables. (Compatible con los modelos i-Raman-Plus, i-Raman Pro e i-Raman EX).</p>	
BWT-840001123	Escáner de códigos de barras 1D por Bluetooth	
	<p>Escáner de código de barras 1D por Bluetooth para utilizarlo con el software BWID manejando un aparato Raman portátil</p>	